

IGIENE ORALE

Create it 

IGIENE ORALE

**NSK**

## Igiene orale avanzata per dentisti e igienisti

Rimozione di tartaro e biofilm sotto e lungo la linea gengivale insieme a pulizia dei denti e lucidatura.

Significativamente migliorati i risultati del trattamento parodontale.

L'ampia gamma di prodotti NSK per l'igiene orale consente di raggiungere tutti questi obiettivi.

Mantenere denti in buone condizioni di salute per un lungo periodo di tempo è molto importante per i pazienti.

NSK supporta la vostra quotidianità con apparecchiature professionali per l'igiene orale efficaci e confortevoli da utilizzare, come i nostri dispositivi a ultrasuoni e a polvere ad alte prestazioni.

## INDICE

<b>Varios Combi Pro</b> .....	<b>03 - 06</b>
<b>Ultrasuoni</b> .....	<b>07 - 08, 13 - 14</b>
<b>Polvere</b> .....	<b>19 - 20, 23 - 24, 27 - 30</b>
<b>Dispositivi NSK ad ultrasuoni</b> .....	<b>07 - 08</b>
<b>Varios Serie</b> .....	<b>09 - 14</b>
<b>Ti-Max S970</b> .....	<b>15 - 18</b>
<b>Dispositivi NSK a polvere</b> .....	<b>19 - 20</b>
<b>Prophy-Mate neo</b> .....	<b>21 - 22</b>
<b>FLASH pearl</b> .....	<b>23 - 24</b>
<b>Perio-Mate</b> .....	<b>25 - 30</b>
<b>iProphy</b> .....	<b>31 - 32</b>
<b>Manipoli</b> .....	<b>33 - 34</b>
<b>Parti di ricambio</b> .....	<b>35 - 36</b>
<b>Trattamenti Professionali</b> .....	<b>37 - 38</b>

# 2 in 1

Scaling ad ultrasuoni x Polvere per pulizia



Per gli specialisti dell'igiene orale.  
Novità NSK, il marchio di manipoli n.1 a livello mondiale.

## Varios Combi Pro

## Due sistemi di profilassi in uno

Combinazione del trattamento di scaling ad ultrasuoni e del trattamento con polvere di pulizia, per un'efficace igiene orale e controllo del biofilm.



### Scaling ad ultrasuoni

### Powder therapy per sopragengivali

### Powder therapy per subgengivali (opzionale)

Sistema innovativo che permette di combinare insieme due applicazioni in modo sicuro ed efficace.

#### Due sistemi in uno

NSK ha abbinato il trattamento ad ultrasuoni e quello Air polishing in un'unica unità di trattamento professionale. Questo permette di risparmiare tempo e spazio e di ottimizzare le diverse procedure.

#### Impostazione automatica delle funzioni di trattamento Air polishing per applicazioni sopragengivali e sottogengivali

Collegando il serbatoio della polvere, l'unità seleziona automaticamente le funzioni per applicazioni sopragengivali e sottogengivali, evitando così possibili errori di selezione.

#### Unità e serbatoio indipendenti

Il serbatoio e il manipolo sono amovibili, permettendo così un facile cambio dalla funzione sopragengivale a quella sottogengivale. Semplice utilizzo e manutenzione agevolata.

#### Nessun rischio di ostruzione

Mantenendo separati l'unità di controllo, il manipolo e il cordone del manipolo si elimina completamente il rischio di ostruzione provocato dalla polvere. I canali che trasportano la polvere e l'acqua sono facilmente raggiungibili, a favore di una corretta manutenzione.

#### Separazione delle polveri

Il sistema con serbatoi, manipoli e cordoni separati, indipendenti per procedure sopragengivali e sottogengivali, elimina il rischio che le polveri si mischino tra loro o penetrino all'interno dell'unità di controllo.

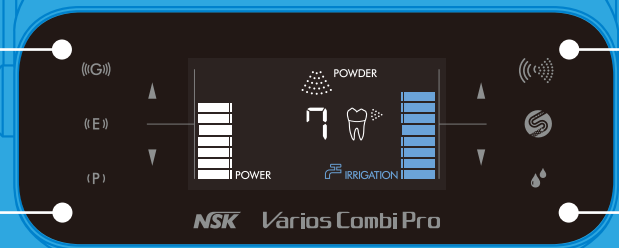
# Praticità di utilizzo ottimizzata

## Display di facile lettura

Chiara visualizzazione delle funzioni per una miglior sicurezza ed efficienza operativa. In questo modo l'operatore può confermare rapidamente il programma in uso (sopragengivale, sottogengivale o ad ultrasuoni), il livello di potenza (10 livelli) ed il volume dell'acqua.

## Ampio pannello LCD

Il pannello LCD offre un'eccellente visibilità ed un contrasto ottimale. Elevata resistenza grazie allo speciale rivestimento antigraffio.




### Funzionamento ultrasuoni




### Funzionamento polvere


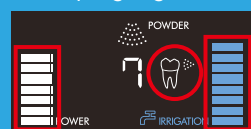
### Applicazione sopragengivale



### Applicazione sottogengivale

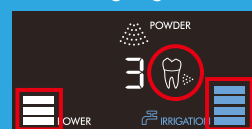

## Cambio automatico della modalità

Passaggio automatico dalla modalità ad ultrasuoni a quella Air polishing attraverso un sensore di riconoscimento che si attiva al sollevamento del manipolo dal suo supporto.

## Memorizzazione delle impostazioni precedenti

La memoria del sistema può archiviare i parametri dei trattamenti, come il volume dell'acqua, la pressione dell'aria e il livello di potenza degli ultrasuoni. Per cambiare le impostazioni è sufficiente sollevare il manipolo.

\* Per le funzioni polvere, modifica delle impostazioni in caso di sostituzione della camera.

## Manutenzione semplice

### Funzione autopulente

Il sistema prevede la pulizia automatica del manipolo e del cordone, sia a seguito delle applicazioni ad ultrasuoni che quelle con polvere: in soli 45 secondi si ottiene l'igiene necessaria per operare nuovamente in piena sicurezza.

### Facilità di manutenzione

Le punte, il manipolo, il cordone del manipolo e la camera sono facili da smontare.

### Superfici lisce per facilitare la pulizia

Il corpo è senza giunture e liscio in modo che risulti più facile la rimozione dei residui di polvere. Il display è trattato con un rivestimento antigraffio.

## Controllo delle principali funzioni

### Pedale di controllo multifunzione

Approfondite ricerche sul movimento del piede e sulla sensibilità sensoriale hanno contribuito alla progettazione del pedale di controllo multifunzionale, per offrire all'operatore la possibilità di utilizzare l'apparecchio senza mani e senza interruzioni. Utilizzando solo il piede, l'operatore può attivare o disattivare le diverse funzioni e modificare le impostazioni di potenza. Il pedale è dotato di un'apposita staffa per consentire lo svolgimento delle attività senza mani.



### SISTEMA PERIO opzionale

MODELLO	CODICE
Varios Combi Pro Perio Set	Y1003042

**Contenuto**  
 • Serbatoio PERIO • Cordone PERIO • Manipolo PERIO • Puntale Perio-Mate  
 • Beccucci Perio-Mate • Polvere Perio Mate

### Opzionale

MODELLO	CODICE
iCart Prophy	S9095

• Dimensioni: L 450 x P 380 x H 660 mm  
 • Peso unità: 21 kg



### Varios Combi Pro Set base

ConLuce	MODELLO	CODICE
●	Varios Combi Pro Basic Set	Y1002843

**Contenuto**  
 • Manipolo PROPHY con puntale 60° • Cordone PROPHY • Serbatoio PROPHY  
 • FLASH pearl (5 bustine da 15 gr cad) • kit di manutenzione • Manipolo VA2LUX  
 • Cordone VA2LUX • 3 punte Scaling • Cassetta di sterilizzazione  
 • Serbatoio per irrigazione (400 ml) • Pedale

**Specifiche tecniche**  
 • Alimentazione: AC 100 V-240 V 50/60 Hz  
 • Frequenza: 28-32 KHz  
 • Dimensioni: L 225 x P 290 x H 162 mm (compreso serbatoio)  
 • Peso unità: 2,6 kg (senza cordone)  
 • Volume serbatoio: 400 ml





## iPiezo engine®

L'esclusivo motore ad ultrasuoni AI reagisce in modo intelligente alle condizioni della superficie dentale

"Vorrei essere più bravo nello scaling", "Vorrei ci fosse un modo più facile per rimuovere i depositi". Abbiamo considerato attentamente le opinioni dei medici nello sviluppo del nostro motore ad ultrasuoni AI unico e di nuova generazione, elemento centrale della serie ad ultrasuoni NSK. Le azioni dell'operatore sono trasmesse con precisione alla punta, come se questa fosse un'estensione della mano. Questo permette di adeguare il trattamento alle condizioni della superficie dentale. Il risultato è un trattamento più rapido e più delicato per i pazienti e allo stesso tempo eco-compatibile, in quanto funziona in modo efficiente con un basso consumo energetico.



### Completo di motore ad ultrasuoni AI di nuova generazione, iPiezo engine®

L'esclusivo motore iPiezo ad ultrasuoni ad alte prestazioni di NSK consente un funzionamento omogeneo poichè trasmette i movimenti dell'operatore fino alla punta.

#### Funzione Feedback

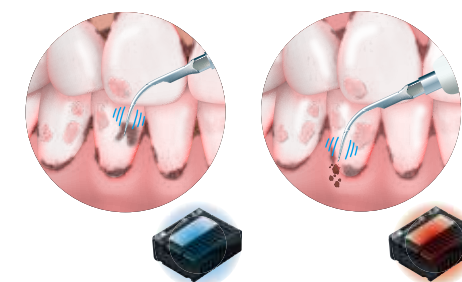
Fornisce la potenza appropriata alla punta a seconda delle condizioni della superficie del dente. iPiezo engine emette una frequenza stabile evitando le cadute di tensione, anche con tartaro duro.

#### Funzione Auto Tuning

Assicura la stabilità della frequenza in uscita adattandola automaticamente al carico necessario per ogni tipo di punta. Ciò permette l'impostazione di una potenza ottimale per trattamenti efficaci.


#### Garantisce uno scaling regolare

Gli ablatori a ultrasuoni convenzionali perdono potenza nel momento in cui si passa dal tartaro morbido al tartaro duro. Il carico all'estremità della punta viene rilevato automaticamente dall'azione del motore iPiezo che consente uno Scaling costante, senza perdita di potenza.



#### LED Manipolo LED sottile e altamente ergonomico

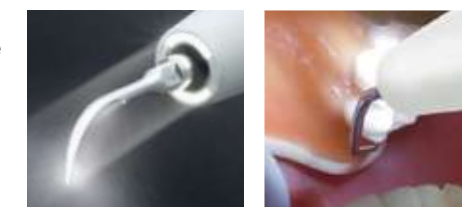Grazie alla punta sottile di  $\varnothing 9,5$  mm, il manipolo Varios2 LUX è semplice da utilizzare in tutta la cavità orale. Il manipolo sottile facilita l'approccio fluido alle zone di difficile accesso, come quella dei molari. Tutto questo consente libertà di movimento nella cavità orale e alla punta di essere posizionata all'angolo corretto. Il manipolo ultraleggero e di facile presa riduce lo sforzo sulle mani e sulle dita. L'ampio spettro di illuminazione a LED molto simile alla luce naturale, rende la visione sempre nitida ed elevata la capacità di rilevamento.



La sterilizzazione in autoclave e la termodisinfezione sono entrambe possibili, il che garantisce elevati standard di sicurezza



#### Cassetta di sterilizzazione

Il manipolo, le punte e la chiave dinamometrica possono essere sterilizzati insieme.



# Varios Serie Intelligente

NSK offre una gamma sempre più ampia di trattamenti a ultrasuoni intelligenti con l'inimitabile motore intelligente di nuova generazione e 70 tipi di punte



## Varios 970 Unità portatile multifunzione estremamente versatile

### Il design compatto ed elegante dalle prestazioni elevate

La funzionalità necessaria per le applicazioni ad ultrasuoni è disponibile nel modello più avanzato della nostra serie compatta: Varios 970. Il nostro sistema a 2 serbatoi ad alta capacità consente all'operatore di concentrarsi sul trattamento, senza preoccuparsi dell'acqua per l'irrigazione. La manutenzione quotidiana è semplice, con funzione di risciacquo automatico e design del corpo senza giunture. Attraverso lo studio attento e continuo dei feedback degli utenti, siamo riusciti a raggiungere un'elevata operabilità e sicurezza.

#### Grande display a LED

Il grande display a led visualizza 10 livelli di potenza e un grafico a barre del volume di irrigazione. Inoltre, l'intuitiva disposizione dei tasti di comando riduce al minimo gli errori dell'utente. La regolazione della potenza e la selezione delle funzioni possono essere eseguite in modo semplice e realistico.



#### Grandi serbatoi

I due serbatoi possono essere posizionati e rimossi facilmente e possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di irrigazione a complemento del trattamento. I serbatoi grandi da 400 ml offrono un'ampia capacità di irrigazione e tempi di permanenza in poltrona ridotti. Test ripetuti dei nostri componenti e materiali garantiscono un'elevata durabilità anche in caso di utilizzo prolungato con soluzioni di irrigazione antisettica.



#### Maggiore durata contro le soluzioni antisettiche

L'introduzione del tubo dell'acqua a base di resina del serbatoio, pompa e manopola, assicura una durata notevolmente superiore in quanto riduce sensibilmente la corrosione e la ruggine causata dal residuo di soluzioni antisettiche.



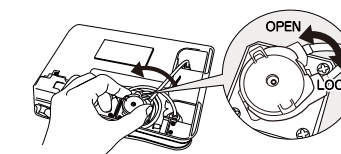
#### Modalità Auto Cleaning

La modalità di pulizia automatica sciacqua i tubi, la manopola e le punte tramite un pulsante da premere quando necessario. I due canali possono essere lavati indipendentemente.



#### Pompa di irrigazione facilmente sostituibile

Poiché è possibile sostituire da sé i componenti dell'impianto di irrigazione, la maggior parte dei problemi possono essere risolti in studio.



#### Varios 970 Set completo

Con Luce	MODELLO	CODICE
●	VA970 LUX 230V S1	Y1004161
—	VA970 230V S1	Y1004160

**Contenuto**  
 • Unità di controllo • Manipolo • Cordone • 3 punte Scaling (G4, G8, G16)  
 • Pedale di controllo (FC-70) • 2 serbatoi  
 • Chiave dinamometrica con limitatore di Torque (3 pz)  
 • Cordone AC • Cassetta di sterilizzazione

**Specifiche tecniche**  
 • Alimentazione: AC 230V 50/60 Hz  
 • Frequenza: 28-32 KHz  
 • Potenza max in uscita: 11 W (modalità G)  
 • Dimensioni: L 160 x P 270 x H 190 mm (compreso serbatoio)  
 • Peso unità: 2,1 kg (escluso attacco)  
 • Volume serbatoio: 400 ml (x 2)



# Varios 370

## Ablatore ultrasonico multifunzionale portatile

Varios 370 è stato progettato per essere installato su qualsiasi riunito grazie alla sua forma compatta. Facile da utilizzare, si adatta a molteplici applicazioni cliniche.



### Vantaggi

- Tecnologia iPiezo engine
- Unità compatta e portatile
- Pannello di controllo intuitivo, di facile utilizzo



### Varios 370 – Esempi di installazione



Sul braccio del riunito con staffa opzionale.



Sopra/sotto il vassoio di appoggio con specifico supporto dell'unità.



### Varios 370 Set completo

Con Luce	MODELLO	CODICE
—	VA370	Y1001340

**Contenuto**  
 • Unità di controllo con cordone • Supporto unità di controllo • Adattatore AC  
 • Manipolo • Supporto manipolo • Set di filtri per l'acqua • Pedale di controllo (FC-71)  
 • 3 punte Scaling (G4, G6, G8) • Chiave dinamometrica con limitatore di Torque

**Specifiche tecniche**  
 • Alimentazione: 100-240 V AC 50/60 Hz  
 • Frequenza: 28-32 KHz  
 • Potenza max in uscita: 11 W (modalità G)  
 • Dimensioni: L 80 x P 115 x H 32 mm (senza cordone)  
 • Peso unità: 0,43 kg (senza attacco)



# Varios 570

## Compatto e versatile

Varios 570 offre tre modalità di potenza selezionabili in base all'applicazione desiderata: "G" (Generale), "E" (Endodonzia) e "P" (Perio). Il livello di potenza può essere regolato per ogni modalità. Inoltre, selezionando la modalità "P", è possibile limitare la potenza al minimo, indispensabile durante determinati trattamenti parodontali.

### Vantaggi

- Tecnologia iPiezo engine
- Design compatto
- Pannello di controllo intuitivo, di facile utilizzo



### Varios 570 Set completo

Con Luce	MODELLO	CODICE
●	VA570 LUX	Y1001273

**Contenuto**  
 • Unità di controllo con cordone • Adattatore AC • Manipolo  
 • Set di filtri per l'acqua • Pedale di controllo (FC-70) • 3 punte Scaling (G4, G6, G8)  
 • Chiave dinamometrica con limitatore di Torque

**Specifiche tecniche**  
 • Alimentazione: AC 100 V-240 V 50/60 Hz  
 • Frequenza: 28-32 KHz  
 • Potenza max in uscita: 11 W (modalità G)  
 • Dimensioni: L 160 x P 135 x H 65 mm  
 • Peso unità: 0,43 kg



# Varios 170

## Ablatore ultrasonico multifunzionale integrato

### Dimensioni ridotte per una facile installazione su ogni tipo di riunito

Varios 170 è il sistema integrato più piccolo sul mercato, dotato della tecnologia iPiezo engine che assicura una potenza stabile in uscita. Il manipolo, comodo e leggero, con doppia illuminazione LED, può essere aggiunto all'unità e controllato dal pedale.

### Varios 170 Set completo

Con Luce	MODELLO	CODICE
●	VA170LUXS8	Y1004145
—	VA170S8	Y1004144

**Contenuto**  
 • Modulo integrato • Manipolo • Cordone • 3 punte Scaling (G4, G8, G16)  
 • Chiave dinamometrica con limitatore di Torque (3 pz) • Cassetta di sterilizzazione

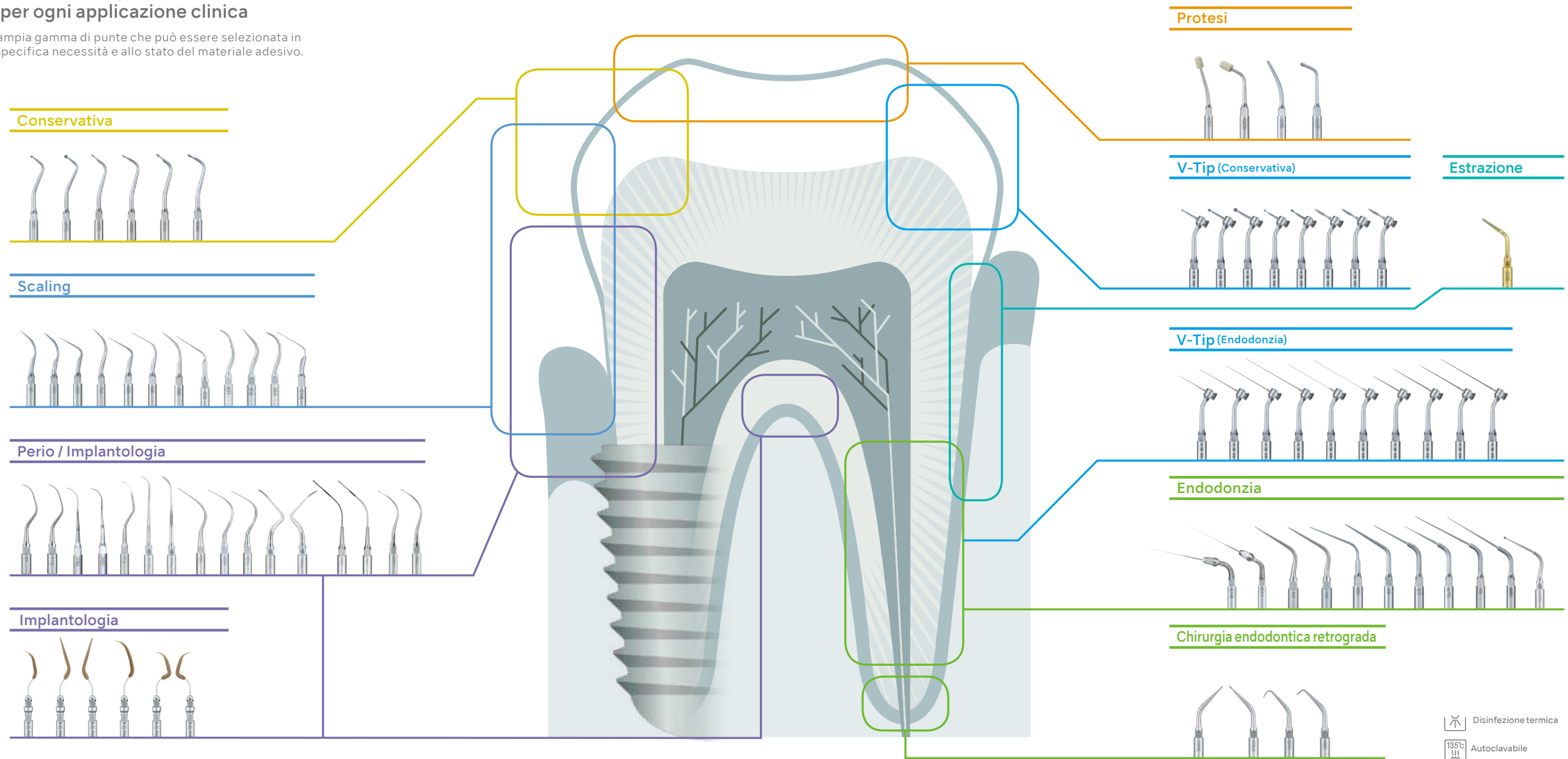
**Specifiche tecniche**  
 • Alimentazione: AC 24 V ±10%  
 • Frequenza: 28-32 KHz  
 • Potenza max in uscita: 11 W  
 • Dimensioni: L 63 x P 54 x H 26 mm  
 • Peso unità: 59 g



# Varietà di punte

NSK offre un'ampia gamma di punte ultrasoniche Varios per ogni applicazione clinica

Esiste un'ampia gamma di punte che può essere selezionata in base alla specifica necessità e allo stato del materiale adesivo.



## Scaling e Perio sezione trasversale e caratteristiche delle punte

Le punte Varios hanno diverse forme, sezioni trasversali, materiali e finiture superficiali. La punta viene selezionata in base al caso specifico e lo stato del materiale adesivo. Questo rende possibile l'uso efficace senza impatto eccessivo sulla superficie del dente o dei tessuti molli.

Sezione / punta	Materiale / estremità della punta	Risultato del trattamento di scaling	Gentile coi denti	Per
G1, G5, G6 G8, G9, G16	Finitura metallica a specchio			Scaling in corrispondenza e sotto il bordo gengivale
P1, P20 P21R/L, P25R/L	Finitura metallica a specchio			Rimozione di macchie in corrispondenza e sotto il bordo gengivale / implantologia
P1D, P2D, P3D	Diamantata			Scaling sotto il bordo gengivale (superficie adiacente / biforcazione)

Sezione / punta	Materiale / estremità della punta	Risultato del trattamento di scaling	Gentile coi denti	Per
P10 P11R/L, P26R/L	Spigolo metallico affilato			Scaling sotto il bordo gengivale
P40, P41	Irrigazione con punta laterale metallica, irrigazione a due punti d'acqua			Irrigazione
V-P10, V-P11R/L V-P12, V-P26R/L	Plastica			Impianti per riparazioni protesiche

Per ulteriori dettagli, consulta la Guida delle Punte





# Ti-Max S970 Air Scalers

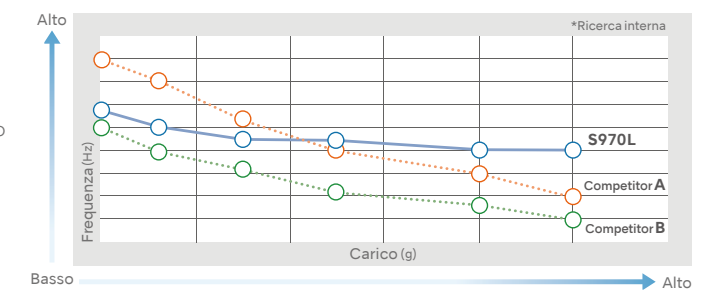
## Evoluzione dell'Air Scaler per un maggior numero di trattamenti

Air Scaler Ti-Max S970 permette di selezionare numerosi livelli di potenza ed offre un'ampia gamma di punte per numerose applicazioni cliniche, da quelle per ablazione ed irrigazione canalare a quelle per trattamenti minimamente invasivi. Grazie al corpo ergonomico e alla sua versatilità, Ti-Max S970 è lo strumento ideale sia per dentisti che per igienisti. Il corpo in titanio, leggero e resistente, ed il design sottile rendono Ti-Max S970 particolarmente apprezzato durante interventi prolungati, garantendo un'eccellente visibilità dell'area di lavoro.




### Potenza sempre stabile

Ti-Max S970 assicura una potenza stabile a tutti i livelli per mantenere un costante movimento di oscillazione, circa 6.000 Hz. Ti-Max S970. È particolarmente indicato per pazienti con denti e tessuti parodontali sensibili.



### Eccellente visibilità

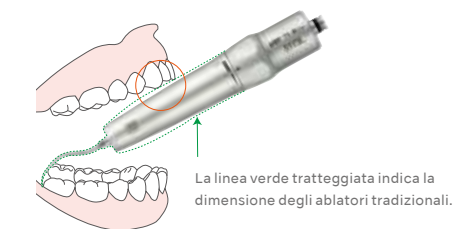Il design sottile di Ti-Max S970 permette la massima visibilità ed un accesso facilitato, anche nelle zone difficili da raggiungere.



### Anello di regolazione della potenza

L'anello di regolazione offre 3 diversi livelli di frequenza in base al tipo di applicazione clinica. La modalità più bassa è indicata per procedure delicate, mentre per applicazioni Scaling è consigliabile selezionare una potenza maggiore.



- Corpo in titanio con trattamento DURACOAT antigraffio
- Anello di regolazione potenza con 3 livelli • Fibre ottiche Cellular Glass

Applicazioni	Punte	Regolazione di potenza		
		1	2	3
Scaling	S1, S2, S3	←	→	→
Perio	S10, S20, S21R, S21L	←	→	
Perio (Implantologia)	S35+V-Tip (V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12)	←	→	
Conservativa (Preparazione Corone)	S81D, S82D, S83D, S86D, S71D, S72D	←	→	
Conservativa (Micro-Conservativa)	S65D, S66D, S67D, S68D	←	→	
V-TIP (Endodonzia)	S75+V-Tip (V-U15-V-U35)	←	→	

Il livello di potenza sopra indicato è standard. Si consiglia di iniziare con un livello basso per poter adeguarlo progressivamente alle necessità specifiche.

### Gamma attacchi

	NSK		KaVo®	Dentsply Sirona®
MODELLO	<b>S970L</b>	<b>S970</b>	<b>S970KL</b>	<b>S970SL</b>
CODICE	<b>T1005</b>	<b>T1020</b>	<b>T1013</b>	<b>T1015</b>
Con luce	●	—	●	●
ATTACCHI	 Attacco NSK		 KaVo® Multiflex®	 Attacco Sirona®

**Contenuto**  
• 3 punte incluse (S1, S2, S3) • Chiave per punte (CR-20) • Coperchio punta (L)

 Disinfezione termica  Autoclavabile

### AS2000 Air Scalers

- Frequenza di oscillazione: 5.600-6.000 Hz • 3 punte incluse (S1, S2, S3)
- Chiave per punte (CR-20) • Coperchio punta (L)



Con luce	MODELLO	CODICE
—	<b>AS2000 M4</b>	<b>T698</b>

• Per Midwest 4 vie • Peso: 67 g

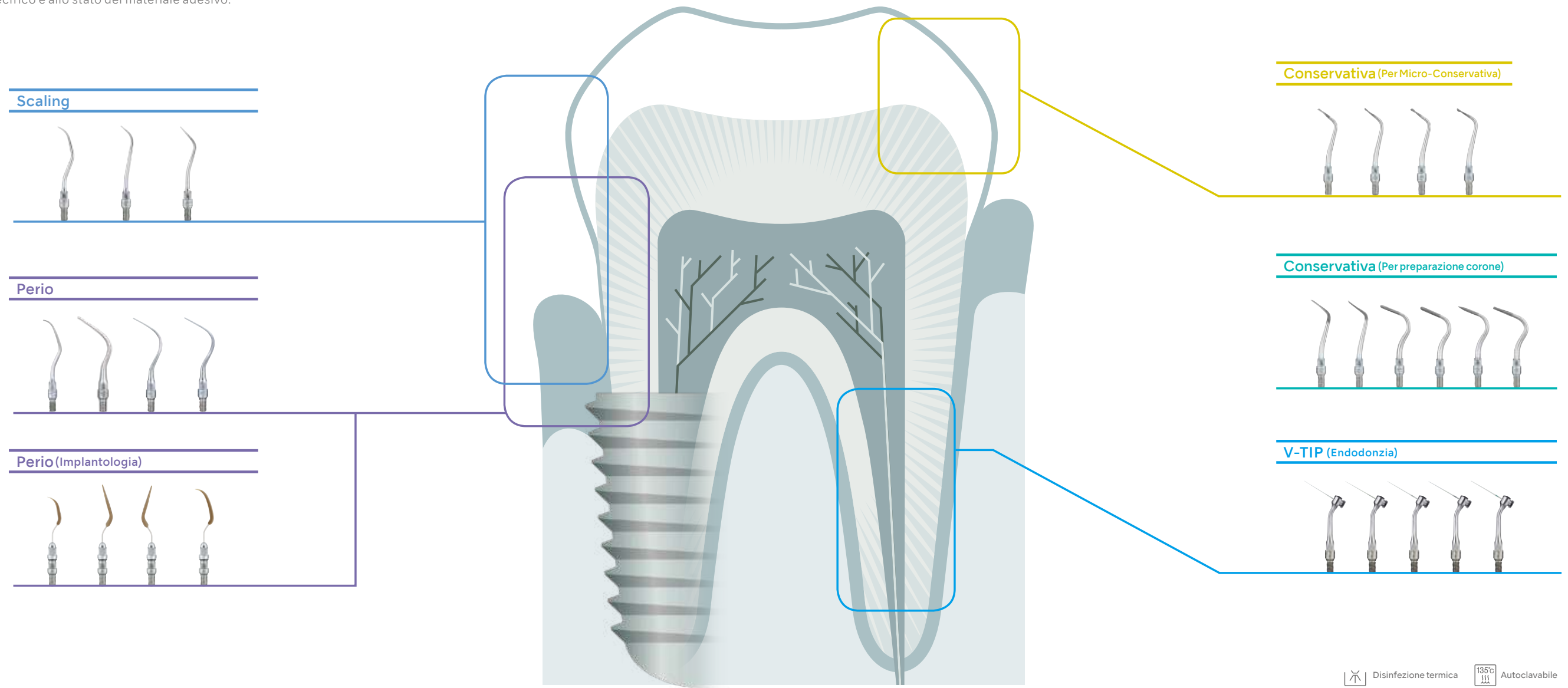
Con luce	MODELLO	CODICE
—	<b>AS2000 B2/3</b>	<b>T697</b>

• Per Borden 2/3 vie • Peso: 64 g

# Gamma punte


NSK offre un'ampia gamma di punte ultrasoniche Varios per ogni applicazione clinica

Esiste un'ampia gamma di punte che può essere selezionata in base al caso specifico e allo stato del materiale adesivo.



TI-Max S970

## Scaling

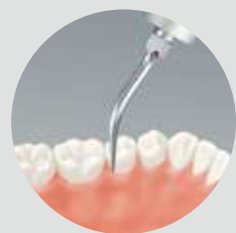


Rimozione tartaro subgengivali

## Perio




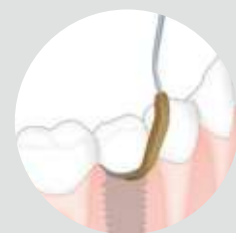Rimozione di biofilm gengivale




Manutenzione protesi e impianti

## Dettaglio e finitura

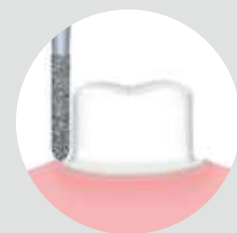

Per la rifinitura dei margini

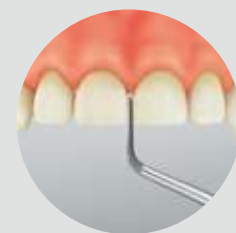

Preparazione di aree interprossimali

La punta a siluro è adatta per la formazione finale di un margine di superficie adiacente, come nel caso di faccette laminate. Il basso rischio di eccessiva molatura e di esposizione alla dentina consente una formazione più conservativa delle superfici adiacenti.



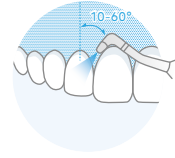



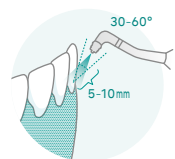
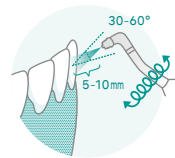



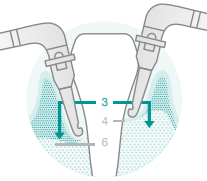
Per ulteriori dettagli, consulta la Guida delle Punte



# Terapia con polvere

Per denti belli, sani e di lunga durata

La terapia con polvere NSK consente la pulizia senza contatto anche in zone dove i depositi non possono essere rimossi perchè non raggiungibili. Ampia facilità d'uso al di sopra e al di sotto del bordo gengivale, insieme ad un ampio scarico di polvere riducono al minimo la pulizia delle fuoriuscite di biofilm o placca. Riduce notevolmente il tempo di permanenza in poltrona e ne aumenta l'efficacia. Confortevole per l'operatore e per il paziente. Il primo passo verso una nuova esperienza con NSK nell'igiene dentale.

Area di intervento	Utilizzare su	A	Da	Con
<p><b>Prophy-Mate neo</b></p>  <p>Rimozione di pigmentazioni Rimozione del biofilm</p>	Dente naturale	 <p>Sopragengivali</p>		 <p><b>FLASH pearl</b></p>
<p><b>Varios Combi Pro</b></p>  <p>Rimozione di placca Rimozione di biofilm</p>	Dente naturale	 <p>Sopragengivali (Margine gengivale)</p>	 	 <p><b>Perio Mate Powder</b></p>
<p><b>Perio-Mate</b></p> 	Superfici di impianti	 <p>Subgengivali</p>		

Varios Combi Pro

Prophy-Mate neo / Perio-Mate



# Prophy-Mate neo Sbiancatore ad aria a bicarbonato

## Prophy-Mate neo, il miglior strumento di lucidatura per bellissimi denti bianchi

La lucidatura a polvere sopragengivale è altamente efficace se usata in combinazione con FLASH pearl.

L'esclusivo ugello NSK consente di ottenere un potente getto di erogazione della polvere.

Il manipo lungo e sottile in abbinamento alla piccola punta dell'ugello, migliora notevolmente l'accessibilità intorno a tutta la superficie del dente.

La pulizia può essere eseguita rapidamente anche in aree interprossimali e in zone di solito difficili da raggiungere.

Il design ergonomico dell'impugnatura è comodo da maneggiare e garantisce agile operatività.



### Polvere di pulizia migliorata

L'originale sistema di ugelli NSK rafforza l'efficacia della polvere sbiancante. Il potente getto riduce notevolmente i tempi di pulizia e di trattamento.



### Facile rimozione dei puntali da 60° e 80°

È possibile scegliere tra il puntale da 60° e 80° di angolazione. Il puntale a 80° è indicato per l'area dei molari, invece quello da 60° per i denti anteriori.



### Facile rotazione di 360°

Gli attacchi del manipo possono ruotare di 360° per una maggiore funzionalità, adattandosi così in maniera flessibile anche ai più piccoli movimenti delle dita e assicurando al tempo stesso una corretta regolazione di angolazione.










### Collegamento in un solo gesto

Prophy-Mate neo è stato progettato per garantire il collegamento diretto con un solo e semplice gesto agli attacchi delle turbine, sia NSK che degli altri maggiori marchi presenti sul mercato.



### Gamma attacchi

	NSK	KaVo®	Dentsply Sirona®	W&H®	Bien Air®	M4	B2
MODELLO	PMNG-PTL-P	PMNG-KV-P	PMNG-SR-P	PMNG-WH-P	PMNG-BA-P	PMNG-M4-P	PMNG-B2-P
CODICE	Y135029	Y135030	Y135031	Y135032	Y135033	Y135034	Y135035
ATTACCO	 Attacco NSK	 KaVo® Multiflex®	 Attacco Sirona®	 W&H® Roto Quick®	 Bien Air® UNIFIX®	 Connessione diretta MIDWEST	 Connessione diretta BORDEN

**Contenuto**  
 • Manipo con puntale da 60° • Coperchio per serbatoio polvere • Puntale da 80°  
 • 5 bustine di polvere di bicarbonato FLASH pearl da 15 g cad • Kit di manutenzione

\*Nessuna luce durante l'uso (quando si utilizza l'attacco con luce).

 Il manipo è lavabile con disinfezione termica

 135°C Autoclavabile

# FLASH pearl Polvere di pulizia

## Eccezionale pulizia con polvere delicata

Non salata! La polvere ha un impatto minore a causa del sapore delicato e fornisce ai pazienti una delicata pulizia della superficie dentale.

Il segreto di una pulizia intensa e di una finitura liscia? Particelle sferiche a base di calcio. La polvere fine con granuli di dimensione media di 54µm, rotola sul dente limitando i danni alla superficie e rimuove rapidamente placca e macchie.

Il trattamento "FLASH pearl" è efficace in sedute brevi, così che il paziente risulta incoraggiato a programmare sedute di pulizia regolari.



## Risultati sempre scintillanti

FLASH pearl, polvere a bicarbonato per Prophy-Mate neo, è una polvere a particelle sferiche ideata per scorrere delicatamente sulla superficie dei denti e penetrare in ogni angolo per una rapida pulizia. La forma sferica dei granuli di polvere diminuisce la possibilità di danni al dente e ai tessuti molli consentendo la rimozione di macchie, placca e tartaro velocemente e in tutta sicurezza.

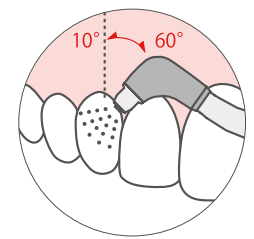
☆ Le reazioni avverse a questo prodotto sono rare.



## Pulizia rapida in spazi ristretti

L'ugello viene tenuto vicino alla superficie del dente con un angolo quasi orizzontale (da 10° a 60°) e manovrato in modo che la polvere si muova sulla superficie del dente. L'ampio angolo di scarico e la maggiore libertà di movimento di scarico consentono un funzionamento regolare e contribuiscono a migliorare l'efficienza del trattamento.

☆ Non applicare direttamente al margine gengivale.



## Zero salinità, ingredienti delicati a basso impatto sui pazienti

Poiché la polvere è composta per il 94% di carbonato di calcio, è assente qualsiasi gusto salino e non risulta sgradevole per i pazienti. Non c'è bisogno di preoccuparsi per i pazienti con diete a basso contenuto di sale.

## Intasamento minimo

Le particelle di polvere fine non si dissolvono facilmente in acqua, riducendo così l'intasamento. La manutenzione dell'attrezzatura è facile in quanto c'è meno accumulo di polvere all'interno degli strumenti.



### FLASH pearl, polvere di pulizia

MODELLO	CODICE
FLASH pearl	Y900693

- Pratico confezionamento
- Contiene 100 buste da 15 g cad



MODELLO	CODICE
FLASH pearl (Flacone)	Y900698

- Contiene 4 fiaconi
- Tappo con misurino
- Flacone da 300 g

# Perio-Mate Rimozione biofilm

## Ampia gamma di applicazioni che vanno dall'uso sopragengivale a quello subgengivale

Rimuovendo la punta dell'ugello Perio-Mate, è possibile trattare l'area sottogengivale fino a 3 mm dal bordo gengivale che richiede la manutenzione più frequente. Inoltre, è disponibile una funzione di regolazione della quantità di polvere per adattarsi alle condizioni chirurgiche, per consentire un'ampia gamma di possibili trattamenti, dalla rimozione rapida e precisa del biofilm alla rimozione delicata ed efficiente del biofilm intorno agli impianti e nella delicata tasca parodontale.



Cura professionale, con polvere, sopra e sotto le gengive

Cura professionale efficace e gentile con i denti. È semplice installare la terapia con polvere collegandole al riunito in uso.

- Il modello "handy" può essere collegato al riunito durante l'utilizzo con una semplice azione
- La punta del beccuccio è ideata per avere buona sicurezza e funzionalità
- Il canale di scorrimento della polvere è corto e dritto, con ridotto rischio di ostruzioni
- Rimozione rapida ed efficace del biofilm

### Anello di controllo erogazione

L'anello di controllo dell'erogazione della polvere favorisce lo scorrimento della stessa in modo semplice ed intuitivo tramite una semplice rotazione manuale. Questo permette di controllare e bloccare il flusso in modo semplice ed immediato, potendo ripulire l'intera area senza interruzioni.



### Rotazione di 360° per interventi precisi e sicuri

Il manipo può essere ruotato manualmente anche durante operazioni complesse. Il puntale garantisce un facile accesso alle aree di difficile raggiungimento, senza danneggiare i denti e i tessuti vicini.



### Facile manutenzione

Il puntale, il beccuccio, il manipo e il contenitore della polvere possono essere facilmente smontati per essere puliti e decontaminati.










### Manutenzione del prodotto

L'utente può facilmente smontare l'ugello, il manipo e il contenitore della polvere. L'intasamento della polvere è improbabile se maneggiato e mantenuto correttamente, ma è facile da gestire seguendo le linee guida di manutenzione e i relativi accessori inclusi nel prodotto. Tutte le parti del manipo (oltre alla punta dell'ugello) possono essere pulite ripetutamente a ultrasuoni o sterilizzate in autoclave.



### Gamma attacchi

	NSK	KaVo®	Dentsply Sirona®	W&H®	Bien Air®	M4	B2
MODELLO	PER-PTL-P	PER-KV-P	PER-SR-P	PER-WH-P	PER-BA-P	PER-M4-P	PER-B2-P
CODICE	Y1002654	Y1002655	Y1002656	Y1002657	Y1002658	Y1002659	Y1002660
ATTACCO	 Attacco NSK	 KaVo® Multiflex®	 Attacco Sirona®	 W&H® Roto Quick®	 Bien Air® UNIFIX®	 Connessione diretta MIDWEST	 Connessione diretta BORDEN

**Contenuto**  
 • Manipo • Serbatoio polvere • Beccucci (40 pz) • Kit di manutenzione • 1 flacone polvere Glicina (160 g)

\*Nessuna luce durante l'uso (quando si utilizza l'attacco con luce).







## Sopragengivale

Rimozione della placca di biofilm dal margine della gengiva (approssimativamente fino a 3 mm all'interno della tasca)

\*Rimuovere la punta del beccuccio

### Rimozione della placca di biofilm nel margine interdentale e gengivale



Prima

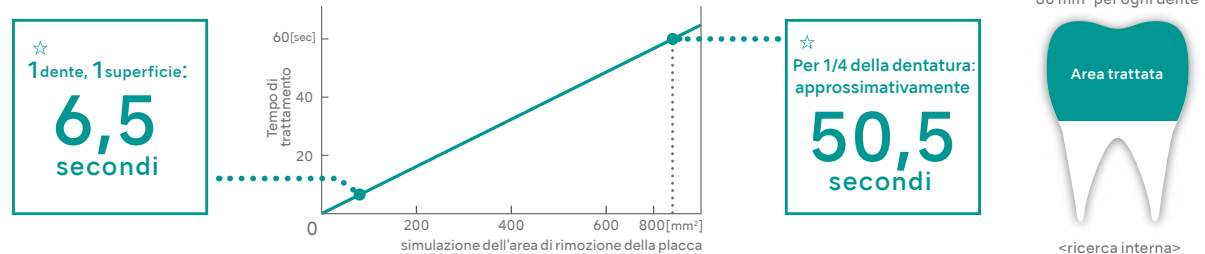


Durante

- Rimozione facilitata del biofilm di placca e di macchie minori dal margine sopragengivale e gengivale.
- Permette di rimuovere placca e biofilm da dentizione affollata, interdentale e da zone cave e fessure, qualora sia difficoltoso l'accesso.
- Rimozione di macchie minori.
- Pulizia delle zone intorno ad impianti dentali e protesi dentarie.
- Riduzione di carico ai denti e gengive grazie al sistema "senza contatto".
- Riduzione del carico su restauro protesico.

### Capacità di rimozione rapida ed efficiente

Il biofilm può essere rimosso dalla superficie dei denti, approssimativamente in 50,5 secondi per 1/4 della dentatura.




### Osservazione dell'area trattata, ingrandita 200 volte con microscopio laser confocale\*


Le superfici di restauri protesici possono essere trattate senza alcun pericolo di danneggiamento.

\*CLSM Lasertec

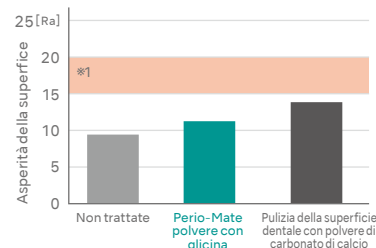
#### Resina dura ibrida



#### Legga oro argento palladio

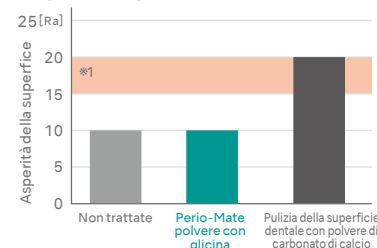


#### Legga al titanio

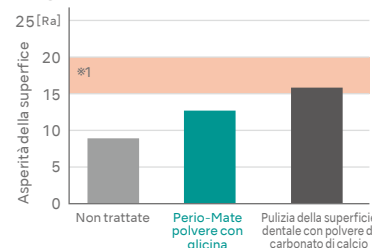

Fonte : Oral Health Engineering, School of Oral Health Care Sciences, Tokyo Medical and Dental University

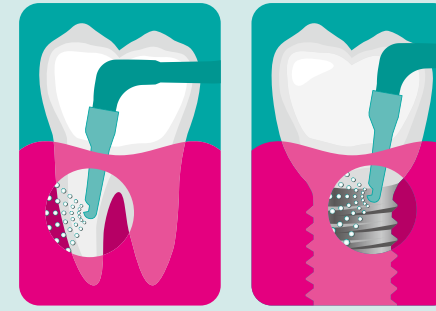\*1 Asperità della superficie pari ad una punta diamante regolare



## Subgengivali

Rimozione biofilm in tasche parodontali da 3-6 mm sotto il margine gengivale

### Rimozione di biofilm in tasche dentali



Prima

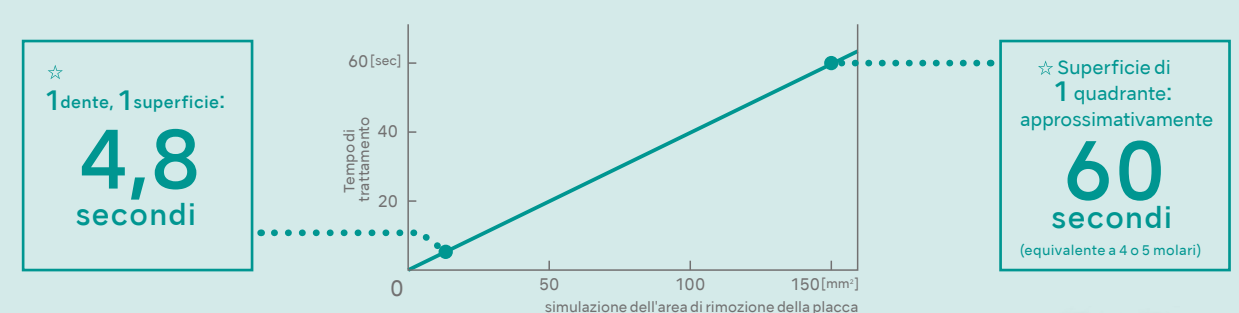


Durante

- Il biofilm nelle tasche parodontali può essere rimosso in approssimativamente 60 secondi per quadrante.
- I depositi possono essere rimossi senza contatto diretto con il biofilm esteso e le adesioni di placca residue. I risultati sono effettivi. È possibile pulire aree dove la punta non può arrivare utilizzando l'effetto di iniezione della polvere.
- Ottimizzazione del flusso della polvere basata sull'analisi del fluido.
- Da una comparazione con altri strumenti di manutenzione, rimangono meno biofilm e placca con grande dispersione di polvere, anche in aree che non sono visibili.
- Il flusso di polvere fluido assicura che il trattamento delle tasche parodontali sia delicato.
- Il design della punta flessibile in plastica del beccuccio, assicura accessibilità e trattamento delicato della tasca.

### Capacità di rimozione rapida ed efficiente

Il biofilm può essere rimosso da tasche parodontali in approssimativamente 60 secondi per quadrante.



1. Utilizzato per SPT (terapia parodontale di sostegno) per tasche da 6 mm che risultano da disagi parodontali. \*2
2. Vaporizzare ogni dente per 20 secondi (5 secondi a superficie) è la soluzione ottimale per eliminare il biofilm subgengivale all'interno di tasche parodontali delicate. \*2
3. Movimento della punta del beccuccio e fini movimenti circolari sono fondamentali per la rimozione efficace del biofilm.




\*2.Flemmig TF, Hetzel M, Topoll H, Gerss J, Haeberlein I, Petersilka G., Subgingival debridement efficacy of glycine powder air polishing., J Periodontol. 2007 Jun;78(6):1002-10., Petersilka GJ, Steinmann D, Haeberlein I, Heinecke A, Flemmig TF., Subgingival plaque removal in buccal and lingual sites using a novel low abrasive air-polishing powder., J Clin Periodontol. 2003 Apr;30(4):328-33.

# Prestazioni e Tecnologia
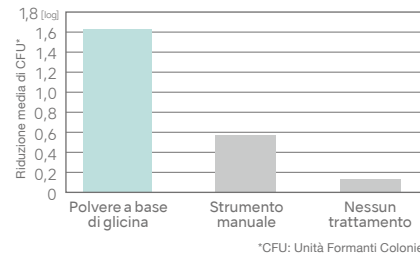
## Riduzione della carica batterica


L'azione di Air polishing della polvere Perio-Mate (a base di glicina) risulta particolarmente significativa nella riduzione della carica batterica rispetto alla tradizionale rimozione manuale della placca.

Petersilka GJ, Tunkel J, Barakos K, Heinecke A, Häberlein I, Flemmig TF. Subgingival plaque removal at interdental sites using a low-abrasive air polishing powder. J Periodontol. 2003 Mar;74(3):307-11.




## Comparazione tra particelle di polvere

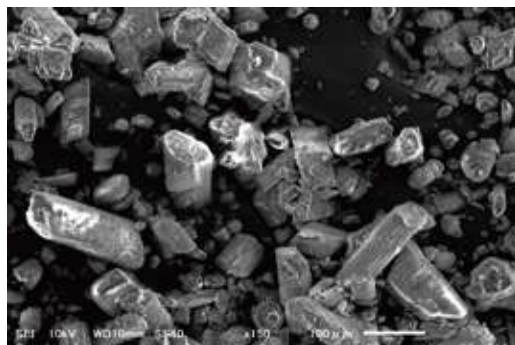Perio-Mate è la polvere sottile ideale per il trattamento di tasche parodontali.



Tradizionale polvere di bicarbonato di sodio

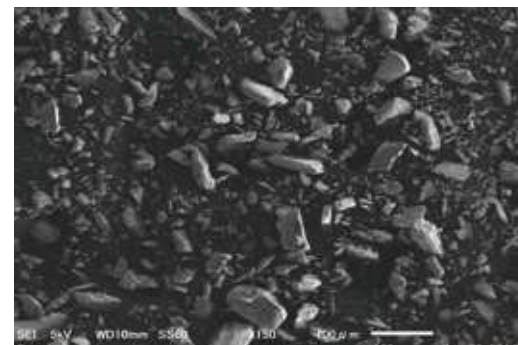Diametro medio della particella > 73 µm  
Immagine ingrandita 150 volte a mezzo microscopio a scansione elettronica



Polvere Perio-Mate (glicina)

Diametro medio della particella > 25 µm  
Immagine ingrandita 150 volte a mezzo microscopio a scansione elettronica

Comune polvere di bicarbonato di sodio



Polvere Perio-Mate (glicina)

## Perio Mate Powder

- Polvere per trattamento sottogengivale.
- Ingrediente principale è la glicina, un aminoacido presente nelle proteine.
- Altamente solubile in acqua per prevenire ritenzione subgengivale.
- Durezza inferiore alla dentina nella scala di Mohs.  
\*La glicina raggiunge livello 2 nella scala di Mohs, la dentina si posiziona tra 2 e 2,5.
- Dimensione particelle < 25 µm.

MODELLO	CODICE
Perio Mate Powder	Y900938

Contenuto  
• due flaconi (160 g cad)



## Beccuccio innovativo NSK

Il nuovo design della punta del beccuccio NSK è composta da materiali semitrasparenti che favoriscono una maggiore visibilità durante le procedure. Le punte monouso risultano igieniche e garantiscono maggiore praticità e sicurezza.



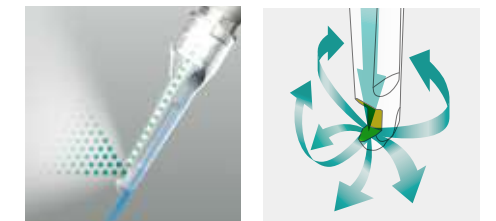
## Beccuccio in plastica flessibile per un miglior accesso nelle tasche con delicatezza

Il sottile beccuccio è dotato di un'ottimale flessibilità che permette di passare delicatamente sulla superficie dei denti ed essere inserito all'interno di tasche strette e superfici radicolari di denti adiacenti senza causare alcun disagio ai pazienti.




## Ottimizzato utilizzando l'analisi del flusso della polvere

La tecnologia di sviluppo della turbina utilizza l'analisi dei fluidi accumulati che permette di "irrorare" tenendo conto del flusso di polvere nella tasca. Non è monodirezionale, ma il flusso è uniforme e completamente direzionale, riducendo al minimo i danni ai tessuti molli. Placca sottogengivale e biofilm possono essere rimossi in modo efficiente. Per quanto riguarda i danni potenziali, le polveri (aria) e l'acqua sono scaricate separatamente sul tessuto parodontale.



## Perio Mate Nozzle Tip Beccuccio

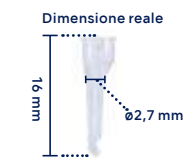- Monouso
- Sterile
- Confezionamento singolo



MODELLO	CODICE
Perio Mate Nozzle Tip	Y1002741

Contenuto  
• 40 pz



# iProphy

Manipolo Cordless per Profilassi

## Riprendi il controllo nelle tue mani.

Senza pedale di controllo, il manipolo cordless iProphy di NSK dà la massima libertà e stabilità per una lucidatura più fluida ed un migliore controllo. Porta la tua pratica clinica ad un livello avanzato migliorando le tue performance giorno dopo giorno.



## La testina ultra mini permette di avere un campo visivo senza ostacoli

La testina ultra mini permette di avere un campo visivo senza ostacoli. Permette di eseguire il trattamento in modo ancora più semplice e preciso.

## Semplice controllo della potenza

Il controllo della potenza a portata di mano. Non occorre usare i comandi a pedale, iProphy mantiene facilmente le basse velocità di rotazione, un'operazione difficile per i contrangoli standard.

## Leggero e semplice da impugnare

Progettato e sviluppato per offrire le più innovative caratteristiche ergonomiche. Il manipolo, semplice da impugnare e ben bilanciato, è leggero da utilizzare anche per trattamenti di lucidatura relativamente lunghi.



## Sostituzione semplice della testina

Sostituzione semplice della testina mediante il sistema a innesto rapido. Inoltre, l'operatività è notevolmente migliore perché la testina può essere posizionata con 6 diverse angolazioni per adattarsi in modo ottimale alla posizione richiesta per ogni procedura.



### iProphy Testine

MODELLO	CODICE
<b>IFX57</b>	<b>C1102</b>

- Per profilassi • Per coppette a vite
- Riduttore 4:1



MODELLO	CODICE
<b>PR-F</b>	<b>H209</b>

- Per angoli prophy monouso
- Riduttore 4:1



### iProphy Set Completi

MODELLO	CODICE
<b>iProphy set completo</b>	<b>Y1500015</b>

**Contenuto**

- Manipolo a motore di iProphy • Testina IFX57
- Supporto di iProphy • Adattatore CA • Beccuccio spray tipo F

### iProphy senza testina

MODELLO	CODICE
<b>iProphy W/O</b>	<b>Y1500069</b>

**Contenuto**

- Manipolo a motore di iProphy
- Supporto di iProphy • Adattatore CA • Beccuccio spray tipo F





# Manipoli

Manipoli per profilassi



## Lucidatura con tazze a vite

### Ti-Max X



Con Luce	MODELLO	CODICE
☉	<b>X57L</b>	<b>C609</b>
—	<b>X57</b>	<b>C619</b>



Speciale sigillo anti polvere

- Riduttore 16:1 • Max velocità: 2.500 min<sup>-1</sup>
- Corpo in Titanio con trattamento DURACOAT
- Per cospette a vite e spazzole • Rotazione 360°

### FX Serie



Con Luce	MODELLO	CODICE
—	<b>FX57m</b>	<b>C1054001</b>



Sistema di difesa

- Riduttore 4:1 • Max velocità: 5.000 min<sup>-1</sup>
- Corpo in Acciaio inossidabile
- Per cospette a vite e spazzole • Rotazione 360°

### EX Serie



#### Testine

MODELLO	CODICE
<b>AR-Y (S)</b>	<b>C187</b>

- Max velocità: 5.000 min<sup>-1</sup>
- Per cospette a vite e spazzole
- Rotazione 360°

#### Corpi

MODELLO	CODICE
<b>EC-30</b>	<b>C100008</b>

<b>EC-30M</b>	<b>C100007</b>
---------------	----------------

- Rapporto 1:1

MODELLO	CODICE
<b>AR-Y (K)</b>	<b>C188</b>

- Max velocità: 5.000 min<sup>-1</sup>
- Per cospette snap-on • Rotazione 360°

MODELLO	CODICE
<b>ER4</b>	<b>C634</b>

<b>ER4M</b>	<b>C634002</b>
-------------	----------------

- Riduttore 4:1

## Lucidatura punte EVA

### Ti-Max X



Con Luce	MODELLO	CODICE
☉	<b>X55L</b>	<b>C608</b>
—	<b>X55</b>	<b>C618</b>



Con meccanismo /serraggio punta

- Riduttore 4:1 • Max velocità: 10.000 min<sup>-1</sup>
- Corpo in titanio con rivestimento DURACOAT
- Punta Eva / punta Profin / lima ortodontica (Gambo ø2,36-2,40 mm)\*
- Azione verticale alternata 1,4 mm • Spray singolo
- \*Non è possibile utilizzare frese con gambo pieno

### EX Serie



#### Testa

MODELLO	CODICE
<b>EVA-Y</b>	<b>C235</b>

- Max velocità: 10.000 min<sup>-1</sup> • Per punte Eva
- Azione verticale alternata 1,4 mm

#### Corpi

MODELLO	CODICE
<b>ER4</b>	<b>C634</b>

<b>ER4M</b>	<b>C634002</b>
-------------	----------------

- Riduttore 4:1



## Parti di ricambio

### Varios Combi Pro

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Scomparto</b> Per uso Prophy		U1135018
<b>Scomparto</b> Per uso Perio		U1135019
<b>Cordone</b> Per uso Prophy		T1051001
<b>Cordone</b> Per uso Perio		T1053001
<b>Manipolo</b> Per uso Prophy		T1074001
<b>Manipolo</b> Per uso Perio		T1077001
<b>Beccuccio</b> Per uso Prophy		T1074012
<b>Beccuccio</b> Per uso Perio		T1077012
<b>VCP Set Serbatoio</b> Serbatoio e coperchio		U1135017
<b>VA2-LUX-HP</b> Manipolo con luce		E351050
<b>VA2LUX-SC</b> Cordone manipolo per VA2LUX		E351054

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>FC-79</b> Pedale di controllo		Z1256001
<b>Set filtri acqua</b> 3,6 m		U1135078
<b>Pompa irrigazione</b>		U1135079
<b>VCP Set O-ring</b> (Conf. da 5 pz)		Y1003435
<b>Coperchio scomparto</b>		U1135089
<b>Guarnizione</b> Per il coperchio della camera		Y1003545
<b>Set O-ring</b> Bottiglia di irrigazione		Y1003544
<b>O-ring</b> 1 per cordone del manipolo		Y1003546
<b>Set O-ring</b> Tubo del manipolo		Y1003500
<b>Set O-ring</b> Puntale		Y1003501
<b>Cordone aria</b> 3,6 m		D0914406 036

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Chiave anello</b>		T1074601
<b>Perio-Mate puntali</b> (Conf. da 40 pz)		Y1002741
<b>Chiave rimozione puntali</b>		T1043751
<b>Olio lubrificazione</b>		Z016112
<b>Filo pulizia (L)</b>		T798091
<b>Filo pulizia (S)</b>		T798095
<b>Lima pulizia</b>		T798092
<b>Pennello pulizia</b>		T798093
<b>Strumento di sblocco</b>		U1135256

### Varios 970 / 570 / 370 / 170

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>VA2-LUX-HP</b> Manipolo con luce		E351050
<b>VA2-HP</b> Manipolo senza luce		E350050
<b>VA970LUX-SC</b> Cordone manipolo per Varios 970 LUX		E351055
<b>VA970-SC</b> Cordone manipolo per Varios 970		E350055
<b>VA170LUX-SC</b> Cordone manipolo per Varios 170 LUX		E351056
<b>VA170-SC</b> Cordone manipolo per Varios 170		E350056
<b>FC-70</b> Pedale di controllo (2,5 m)		Z1008001
<b>FC-71</b> Pedale di controllo (5 m) per Varios 370		Z1008002

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>VA370 Adattatore AC</b> (5 m)		Y1001790
<b>Connettore per fornitura acqua</b>		U387030
<b>Set filtri acqua (2m)</b> 2 tubi acqua, filtro, contenitore filtro		U387040
<b>Tubo acqua (2m)</b>		U387580
<b>Contenitore filtro acqua</b>		Y900069
<b>Anelli tubo</b> (Conf. da 2 pz)		Y900077
<b>Porta manipolo</b> Per Varios 370		10001505
<b>VA Serbatoio 400</b> (400 mL) Per Varios 970		Z1047002

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Pompa irrigazione</b> Per Varios 970		10000643
<b>O-ring</b> Per cordone manipolo		D0310020 080
<b>O-ring</b> Sezione sottile Per serbatoio VA 400		D0312090 100
<b>O-ring</b> Sezione spessa Per serbatoio VA 400		D0310075 150
<b>Varios 350/370 Sostegno</b>		Z254
<b>Varios 350/370 Staffa di sostegno</b>		Z259
<b>Supporto unità</b> Per Varios 370		Y1001812

### Varios Combi Pro / Varios 970 / 570 / 370 / 170

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Filtro acqua monouso</b>		U387042
<b>CR-10</b> Chiave dinamometrica		Z221076
<b>Chiave sostituzione punte E</b>		Z217399

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Supporto punte</b>		Z221080
<b>Coperchio punte L</b>		Z217850
<b>Coperchio punte S</b>		Z217851

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Cassetta sterilizzazione</b>		Z1035001
<b>Chiave</b> 5x8 (Conf. da 2 pz)		Y1001301

### Prophy-Mate neo

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>PMN-HP</b> Manipolo con beccuccio 60°		T797010
<b>Beccuccio 60°</b>		T797012
<b>Beccuccio 80°</b>		T797013
<b>O-ring</b> neo Posteriore		D0312029 070

### Perio-Mate

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>PER-HP</b>		T1043010
<b>Beccuccio</b>		T1043012
<b>O-ring</b> PER Posteriore		D0312023 060
<b>Rimozione punta beccuccio</b>		T1043751

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Beccuccio sfiatatoio PTL</b> neo		T798094
<b>Beccuccio sfiatatoio KV</b> neo		T886094
<b>Beccuccio sfiatatoio SR</b> neo		T887094
<b>Beccuccio sfiatatoio WH</b> neo		T888094

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Beccuccio sfiatatoio BA</b> neo		T889094
<b>Beccuccio sfiatatoio M4</b> neo		T884094
<b>Beccuccio sfiatatoio B2</b> neo		T885094

### Prophy-Mate neo / Perio-Mate

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Tappo serbatoio polvere</b>		T798133
<b>Guarnizione</b>		T798135
<b>O-ring</b> Frontale		D0312039 070
<b>Chiave anello</b>		T797601

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Set O-ring PTL</b> (Conf. da 5 pz)		Y900580
<b>Set O-ring PM</b> (Conf. da 3 pz)		Y900054
<b>Olio lubrificazione</b>		Z016112
<b>Filo pulizia (L)</b>		T798091

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Filo pulizia (S)</b>		T798095
<b>Lima pulizia</b>		T798092
<b>Pennello pulizia</b>		T798093

### Ti-Max S970 / AS2000 Air Scaler

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>CR-20</b> Chiave dinamometrica con limitatore di Torque		Z1090001
<b>Chiave sostituzione punte E</b>		Z217399
<b>Supporto punte</b>		Z252080

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Copertura punta L</b>		Z217850
<b>Copertura punta S</b>		Z217851

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Set O-ring S970</b> Per S970 (Conf. da 4 pz)		Y1001953
<b>Olio lubrificazione</b> Per AS2000		Z016112

### iProphy

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Manipolo a motore di iProphy</b>		EA11170020
<b>Supporto di iProphy</b>		UA10910020

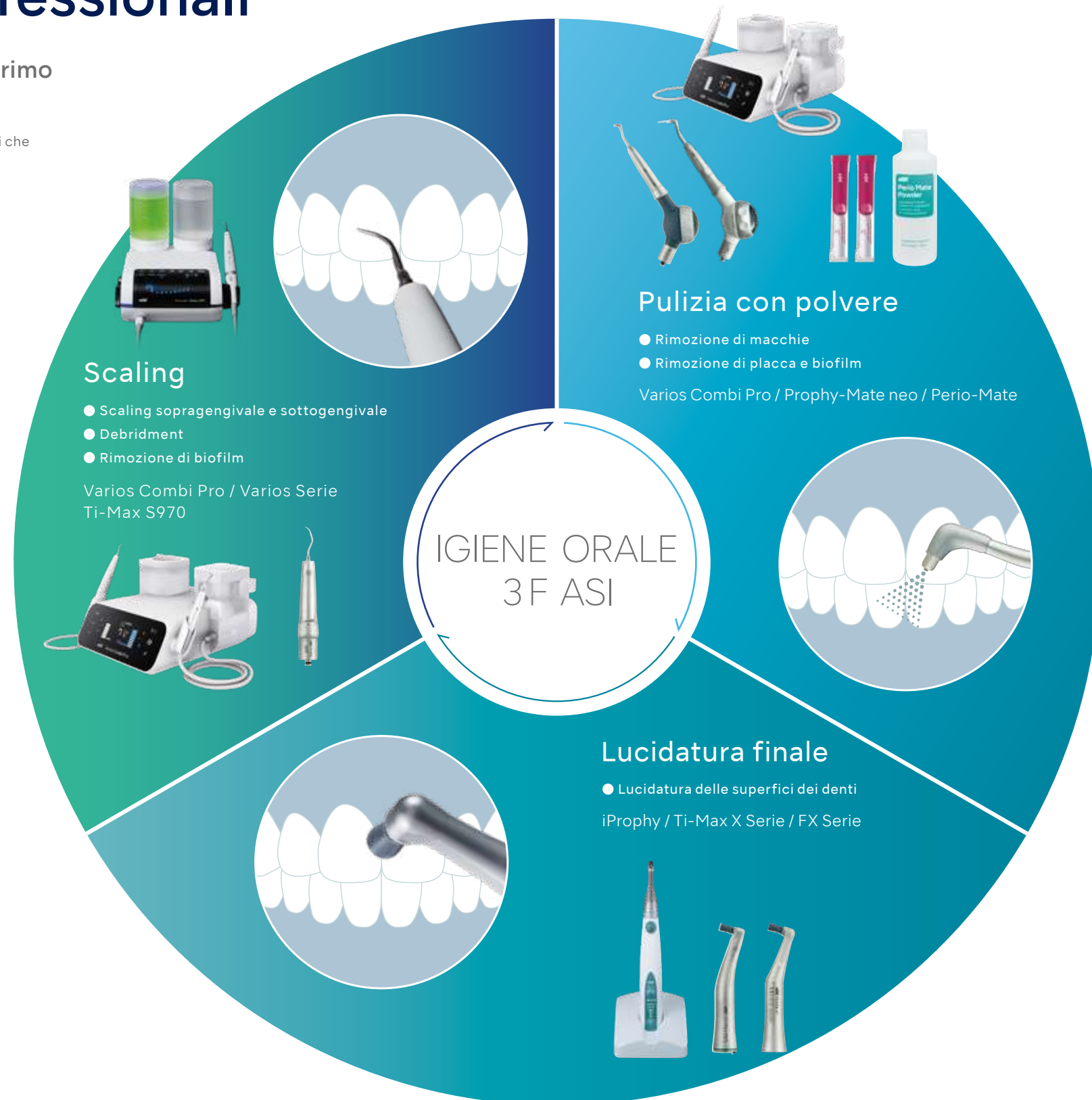
MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Adattatore CA</b>		Y1500014
<b>Pacco batteria</b>		E1080052

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
<b>Beccuccio spray tipo F</b>		Z256090

# Trattamenti professionali

## La scelta dell'attrezzatura giusta è il primo passo nei trattamenti professionali

L'assistenza professionale comprende una varietà di trattamenti che mirano a riportare i denti alla loro originale brillantezza, come la prevenzione e il miglioramento della problematica parodontale, scaling subgingivale e rimozione di batteri patogeni, rimozione di biofilm e prevenzione della carie dentaria attraverso la prevenzione della placca, ri-adesione e rimozione di macchie e tartaro. Al fine di fornire un'assistenza professionale totale, è importante selezionare attrezzature di qualità che garantiscano il trattamento adeguato e l'efficienza operativa adatti alle necessità di ciascun paziente.



KaVo e Multiflex sono marchi registrati da KaVo Dental GmbH.  
Dentsply Sirona e Sirona sono marchi registrati da Dentsply Sirona Inc.  
W&H e Roto Quick sono marchi registrati da W&H Deutschland GmbH.  
Bien Air e UNIFIX sono marchi registrati da Bien-Air Holding SA.

**NAKANISHI INC.** [www.nsk-dental.com](http://www.nsk-dental.com)  
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

**NSK Dental Italy S.r.l.** [www.nsk-italy.it](http://www.nsk-italy.it)  
Via dell'Agricoltura 21, 36016 Thiene VI, Italy

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.